



# FiberStitch™

## Reparo do menisco pela técnica all-inside com implantes de sutura

As âncoras de sutura de baixo perfil, unidas por ponto colchoeiro duplo, substituem os implantes tradicionais plásticos de PEEK rígido

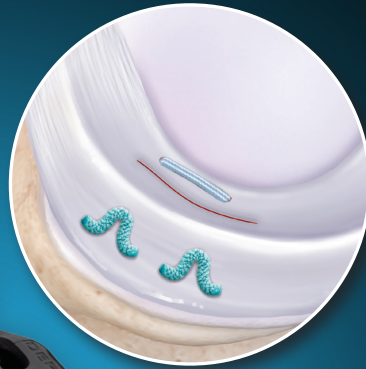


- Confie no dispositivo FiberStitch para obter fixação com implantes de sutura para reparo de menisco all-inside
- Implantes de baixo perfil, fixos com a sutura FiberWire® 2-0 e um nó localizado posteriormente nas âncoras, eliminam um nó na superfície articular

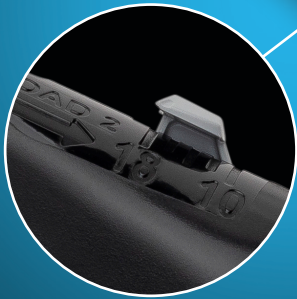

Limitador de profundidade integrado regulável de 10 mm a 18 mm


A agulha de baixo perfil introduz os implantes de sutura através de uma pequena perfuração no menisco

Curva de 12°

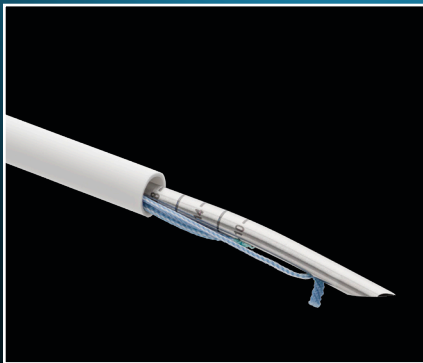


### Curva reversa

Otimizada para lesões em alça de balde maiores, passando suturas inferiores através do menisco

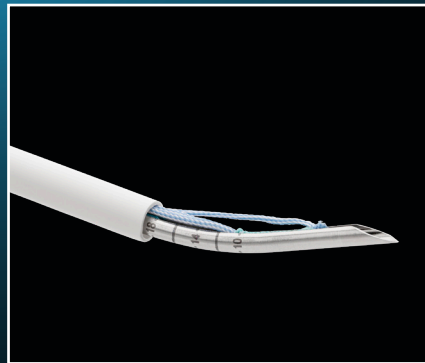

### Curva de 24°

Otimizada para navegar abaixo do côndilo femoral e acessar o corno posterior do menisco

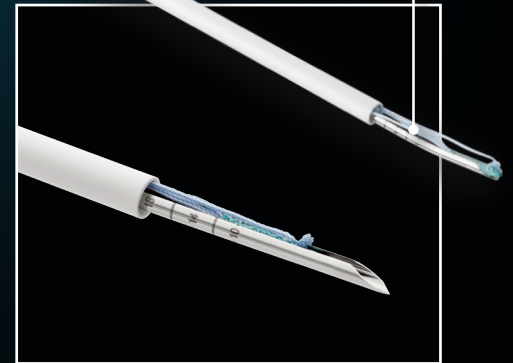

### Reta

Otimizada para lesões posteriores, lesões radiais e abordagem pelo portal lateral para lesões do meio do corpo do menisco medial

As informações aqui inseridas são de caráter estritamente Regional para o Brasil. Tenha em conta as disposições e o âmbito das leis aplicáveis em cada país. Da mesma forma, verifique a disponibilidade do produto em questão com um representante local da Arthrex no seu país.


© 2024-01, Arthrex Inc. Todos os direitos reservados. AD1-000106-pt-BR\_D

**Arthrex®**  
[Ad.Arthrex.com/FiberStitch](https://ad.arthrex.com/fiberstitch)


# FiberStitch™

*Uma gama de opções para o reparo do menisco*

As âncoras de sutura têm perfil baixo, são feitas com sutura colchoeiro dupla, sem nós, autobloqueante e substituem os tradicionais botões plásticos de PEEK.

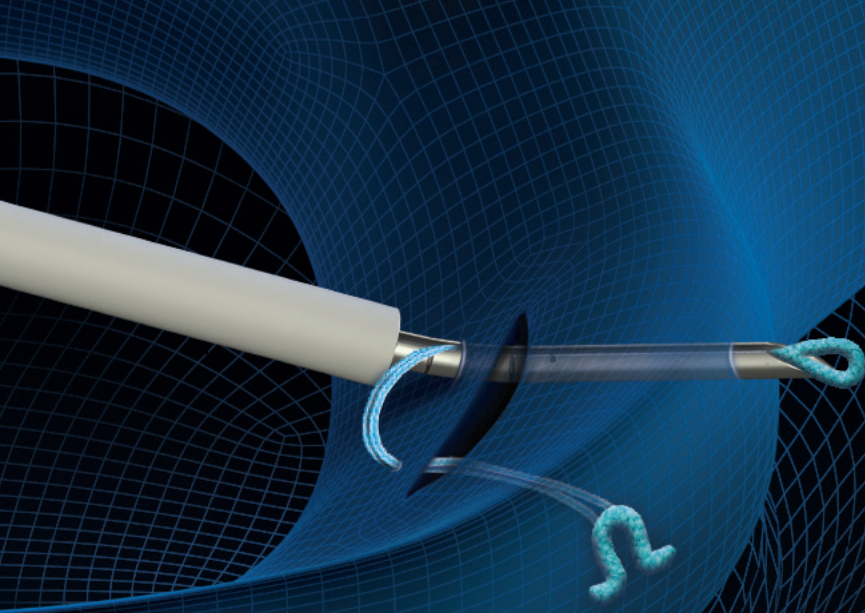

Reto

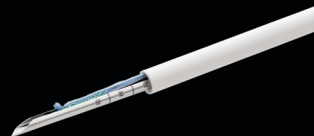

Curva reversa



Curva de 24°




Curva de 12°



Espátula Skid maleável



Com o FiberStitch, você tem uma gama de opções diferentes para o reparo do menisco

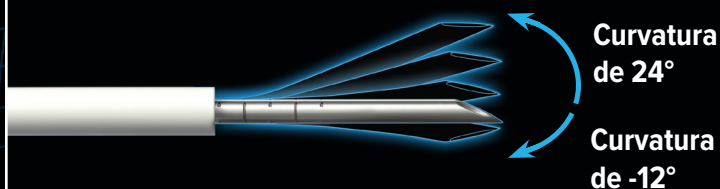

Curvatura de 24°

Curvatura de -12°

**Arthrex®**

[Ad.Arthrex.com/FiberStitch](http://Ad.Arthrex.com/FiberStitch)

© 2021 Arthrex, Inc. Todos os direitos reservados. AD1-000368-pt-BR\_B